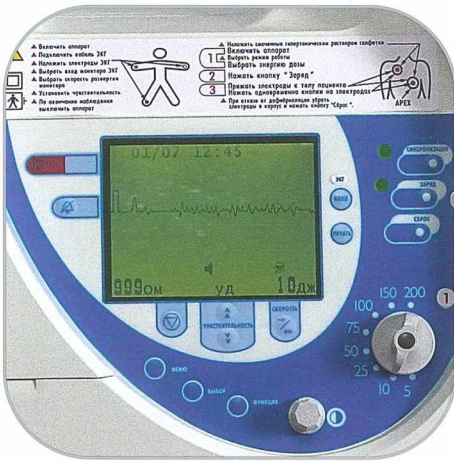


## ДФР-02 УОМЗ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР  
СИНХРОНИЗИРУЕМЫЙ*Заряжая Жизнь*

- печать ЭКГ
- встроенная батарея
- биполярный импульс
- тревоги
- дисплей

**Назначение:**

Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с формированием биполярного импульса ДФР-02 предназначен для купирования нарушений ритма сердца с помощью электрического импульса, а также для регистрации и индикации на мониторе биоэлектрических потенциалов сердца. Прибор может использоваться как для реанимационных мероприятий, так и при плановом восстановлении ритма. Дефибриллятор ДФР-02 УОМЗ предназначен в основном для стационаров, отделений реанимации, интенсивной терапии, кардиохирургических отделений. Прибор также может применяться на догоспитальных этапах медицинской помощи.

ДФР-02 УОМЗ обеспечивает:

- формирование биполярного терапевтически эффективного импульса минимального повреждающего воздействия (8 уровней энергии)
- снятие ЭКГ как с электродов для дефибрилляции, так и по отдельному каналу с электродов ЭКГ.

**Преимущества ДФР-02:**

- электроды разной площади для взрослых и детей
- дисплей с подсветкой
- встроенный аккумулятор
- система сигнализации с разными по тону сигналами
- система защиты канала ЭКГ от импульса дефибрилляции
- память для сохранения 40 фрагментов ЭКГ с возможностью вывода результата на ПК
- термopринтер для распечатки кардиограммы пациента как до, так и после дефибрилляции
- удобная клавиатура
- биполярная форма импульса
- поддержание стандартной формы импульса при любых изменениях сопротивления пациента

## ДФР-02 УОМЗ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР  
СИНХРОНИЗИРУЕМЫЙ

## Технические характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                           | от сети переменного тока (198,0...242)В / (50 ±0,5) Гц<br>от встроенного аккумулятора                                                                                                                                                                                                                                |
| Рабочий цикл                      | время непрерывной работы от аккумулятора 2 часа в режиме монитора<br>количество импульсов максимальной энергии при полной зарядке аккумулятора не менее 30<br>время готовности к работе не более 5 с<br>время восстановления после разряда дефибриллятора не более 3 с<br>время заряда накопителя до 200 Дж — 12 сек |
| Форма импульса                    | биполярный, трапецеидальный                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Уровни энергии                    | от 5 до 200 Дж (8 уровней)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Режим работы                      | синхронизированная / асинхронная дефибрилляция<br>режим кардиомонитора (снятие ЭКГ)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Снятие ЭКГ                        | как с отдельных электродов ЭКГ (в 3-х отведениях последовательно), так и с электродов дефибрилляции                                                                                                                                                                                                                  |
| Дефибриллятор измеряет            | сопротивление пациента, Ом<br>частоту сердечных сокращений, ЧСС                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дисплей                           | ЖК-дисплей, 120х90 мм с регулируемой контрастностью                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Информация на дисплее             | дата и время<br>состояние аккумулятора<br>развертка ЭКГ<br>ЧСС и сопротивление пациента<br>включение звуковой сигнализации<br>включение входа сигнала ЭКГ с электродов для дефибрилляции<br>энергия импульса дефибрилляции<br>режим работы (синхронизация/дефибрилляция)                                             |
| Информация на распечатке принтера | ЭКГ<br>дата, время<br>режим работы, скорость вывода на печать<br>заданная энергия, сопротивление пациента<br>ФИО, возраст, диагноз                                                                                                                                                                                   |
| Возможен вывод информации на ПК   | при использовании дефибриллятора в комплекте с дискетой и кабелем для стыковки с ПК по RS 232<br>возможно активизировать функцию «Память»<br>возможна архивация до 40 фрагментов ЭКГ                                                                                                                                 |
| Электроды                         | для взрослых площадью 100 см <sup>2</sup><br>для детей площадью 50 см <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |